

FICHA TÉCNICA ELECTROESTIMULADOR DIGITAL

TERAPIA – RELAJACIÓN – ALIVIO MUSCULAR

Dispositivo electrónico de terapia por impulsos eléctricos de baja frecuencia que ayuda a aliviar el dolor muscular, mejorar la circulación y promover la relajación.



CARACTERÍSTICAS

-  **Terapia por impulsos eléctricos (TENS/EMS)** de baja frecuencia.
-  **8 modos de masaje:** Presión, Golpeteo, Frotación, Vibración, Percusión, Acupuntura, Ventosas, Masaje.
-  **INTENSIDAD AJUSTABLE**
99 niveles de intensidad.
-  **TEMPORIZADOR**
Programable de 0 a 60 minutos.
-  **PANTALLA LCD**
Visualización clara de modo, intensidad y tiempo.
-  **PORTÁTIL Y FÁCIL DE USAR**
Diseño compacto y ligero, ideal para el uso diario en casa o la oficina.
-  **SEGURO Y CONFIABLE**
Apagado automático al finalizar el tiempo programado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	Digital Therapy Machine
Modos	8 modos de masaje
Intensidad	1 - 99 niveles ajustables
Temporizador	0 - 60 minutos
Pantalla	LCD
Frecuencia	1 - 100 Hz
Voltaje de operación	3 V CC (2 x AAA)
Consumo	< 30 mA
Tamaño del dispositivo	15 x 10 x 2.5 cm (aprox.)
Peso del dispositivo	200 g (aprox.)
Material	ABS de alta resistencia
Color	Blanco con detalles grises

USOS Y BENEFICIOS






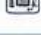
-  **ALIVIA EL DOLOR MUSCULAR**
Ayuda a reducir el dolor y la tensión en hombros, espalda, cintura, piernas, brazos y más.
-  **MEJORA LA CIRCULACIÓN**
Estimula la circulación sanguínea y linfática, favoreciendo la recuperación muscular.
-  **FORTALECE Y TONIFICA**
Los impulsos eléctricos ayudan al fortalecimiento y tonificación muscular (EMS).
-  **RELAJA Y REDUCE EL ESTRÉS**
Promueve la relajación profunda, mejorando el bienestar general.
-  **USO EN CASA Y OFICINA**
Disfruta de una terapia profesional en la comodidad de tu hogar.



PRECAUCIONES

-  No usar en personas con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos electrónicos implantados.
- No usar durante el embarazo.
- No usar sobre heridas abiertas o piel irritada.
- No usar mientras se conduce o se opera maquinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer el manual de usuario antes de usar.

CONTENIDO DEL PAQUETE

-  1 x Unidad principal (Electroestimulador)
-  2 x Sandalias de masaje para pies
-  2 x Electrodos adhesivos (pads)
-  2 x Cables de conexión
-  1 x Manual de usuario
-  1 x Caja de presentación



 8 MODOS DE MASAJE

 99 NIVELES DE INTENSIDAD

 TEMPORIZADOR 0 - 60 MIN

 PANTALLA LCD

 PORTÁTIL Y LIGERO

 TERAPIA EN CASA PROFESIONAL